

FPW Adapter – Adaptador de layout

Produto	: SST – Personal Med – 12.0.0.1	Data da publicação	: 03/12/14
Chamado	: TPWVLF	Banco(s) de Dados	: Oracle
País(es)	: <i>Brasil</i>		

Importante

Esta melhoria depende de execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Funcionalidade efetua a adaptação de arquivos no formato do **Software FPW** para o formato do **Pmed Import Oracle V6**. Permite o agendamento nas tarefas do *Windows* com parâmetros definidos para ser rodado.

Procedimento para Implementação

Importante

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

Atualizações do update/compatibilizador

1. Criação de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Criação	\\images\1.png	45513
Criação	\\images\btnPesquisa.png	45513

Criação	fpw_adapter.dpr	45513
Criação	fpw_adapter.res	45513
Criação	frm_principal.dfm	45513
Criação	frm_principal.pas	45513
Criação	ULayoutAdapterPMED.pas	45513
Criação	ULayoutFPW.pas	45513
Criação	ULayoutPMED.pas	45513

Procedimento para Configuração

Rode o script de inserção da configuração específica:


```
INSERT INTO CFG02 (CODIGOCFG, MINEMONICOCFG, VALORCFG, DESCRICAO) VALUES (539, 'FPWPATHARQ', 'Nome do Arquivo sem extensão', 'Se diferente de vazio, então vai utilizar a string para ser o nome do arquivo a ser lido pelo fpw_adapter.exe');
```

Procedimento para Utilização


1. Salve o executável **fpw_adapter.exe**, na pasta do Personal Med SST.
2. O programa pode ser executado manualmente ou pode ser agendado como uma tarefa do *Windows*.

Rodando o executável manualmente:

1. Clique duas vezes no executável **fpw_adapter.exe**.
2. Será exibida a tela principal.

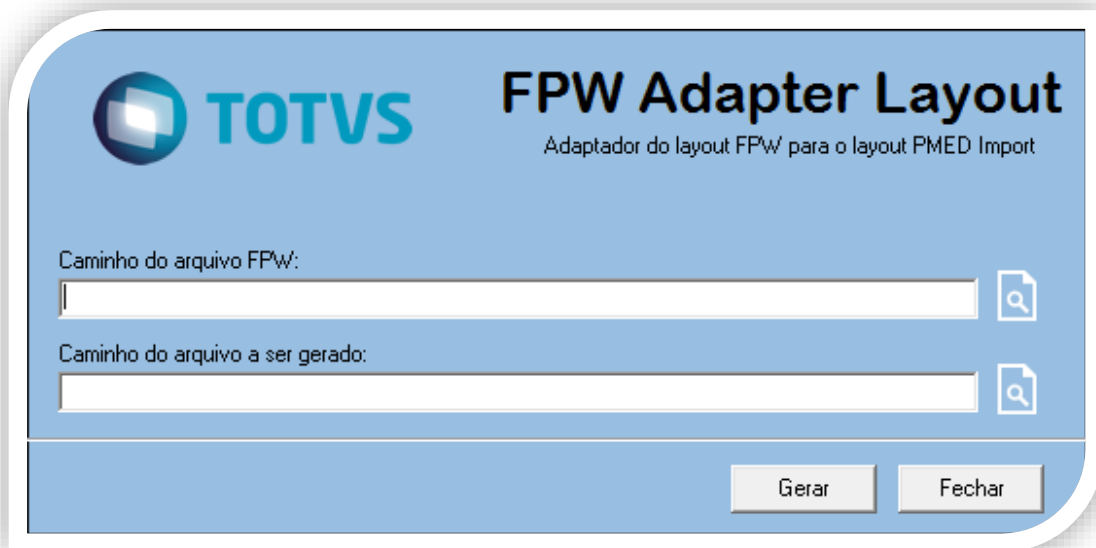


3. Informe a pasta onde fica o arquivo do FPW, e onde será salvo o arquivo adaptado para o Pmed Import.
4. Clique em **Gerar**.

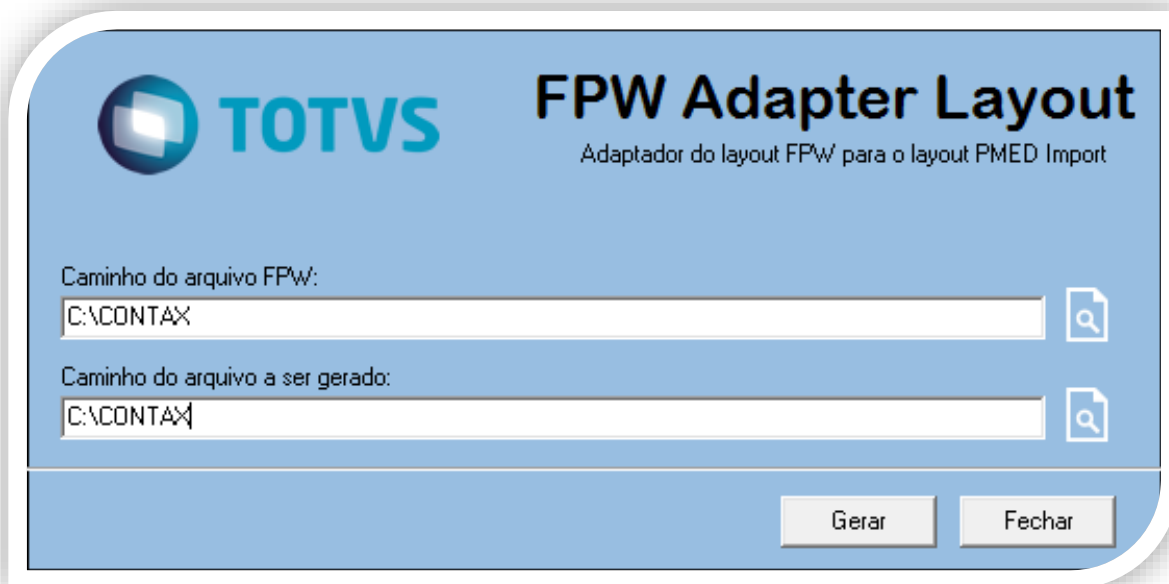


5. O nome do arquivo FPW fica salvo na cfg FPWPATHARQ, sem a extensão. Neste caso o arquivo tem, obrigatoriamente, que ser .txt;
6. O arquivo gerado tem o seguinte nome: fpwImport.txt, e ficará salvo na pasta selecionada como caminho do arquivo a ser gerado.

Rodando o executável como uma tarefa do Windows:


1. Para executar este aplicativo como um serviço do Windows, siga os seguintes passos:
2. Para acessar o agendador de tarefas, acesse **Painel de controle/ Ferramentas Administrativas/ Agendador de Tarefas**.
3. Na tela abaixo clique em **Criar Tarefa**.

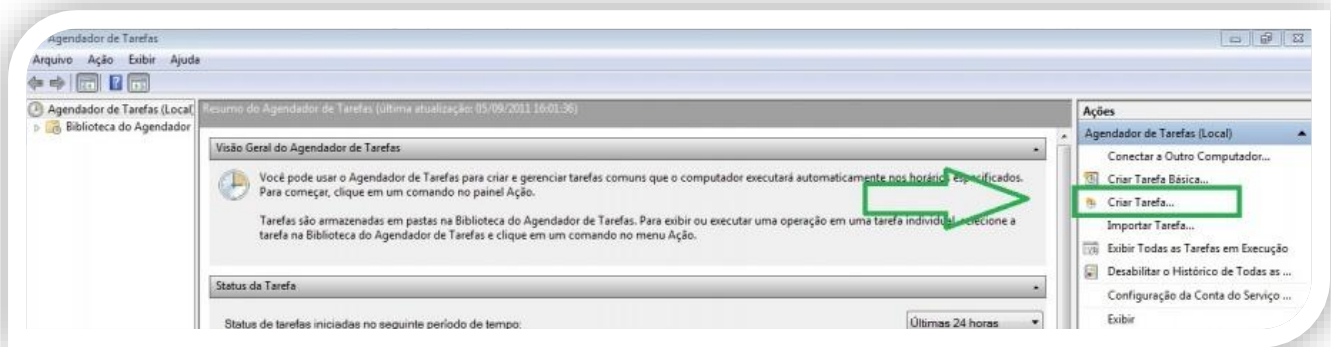


4. Na aba **Geral**, informe um nome para a tarefa, no campo Nome.
5. Clique no botão **Alterar usuário ou Grupo** e defina o usuário que deve estar logado na máquina para que a tarefa seja executada.
6. Selecione a opção **“Executar estando o usuário conectado ou não”**.
7. Selecione a opção **“Oculto”**.

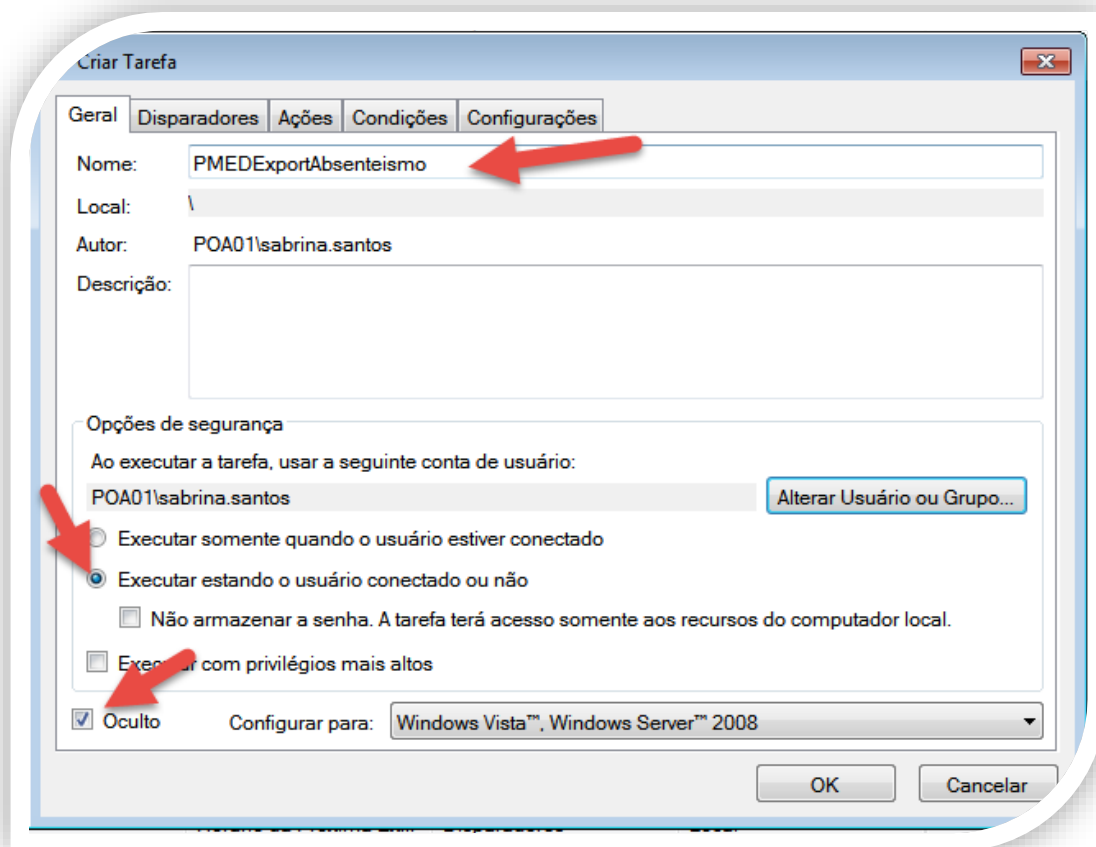


8. Na aba **Disparadores**, clique em **NOVO** e na tela que abrir, defina com qual frequência e horário que a tarefa deve ser executada, e clique em **OK**.

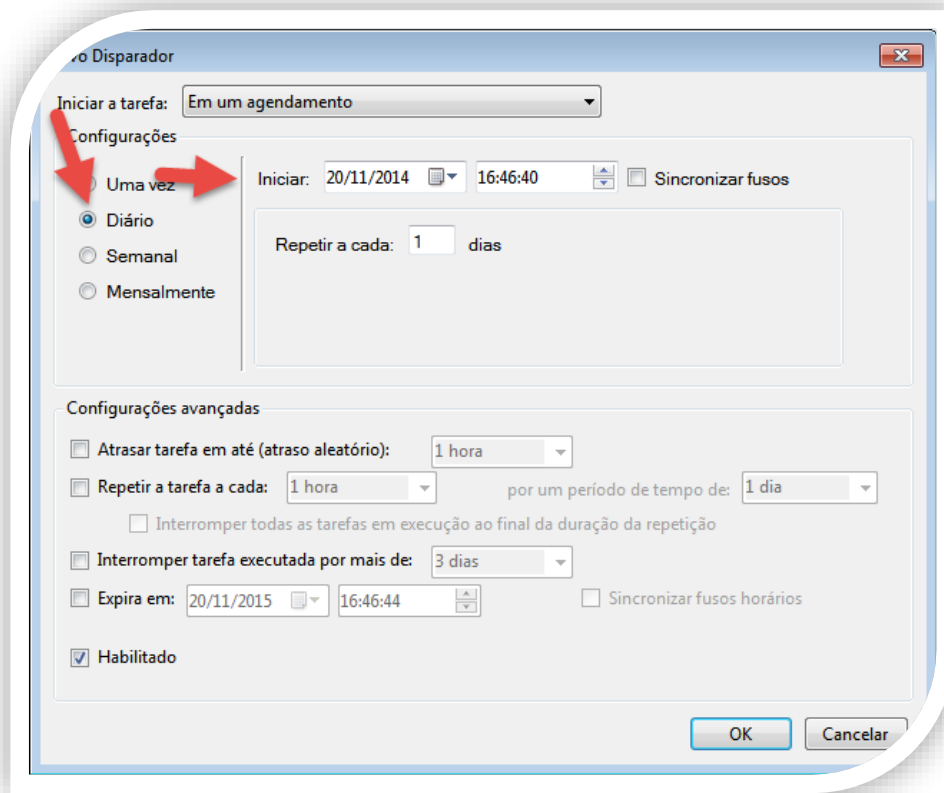

9. Na aba **Ações** clique em **Novo**.

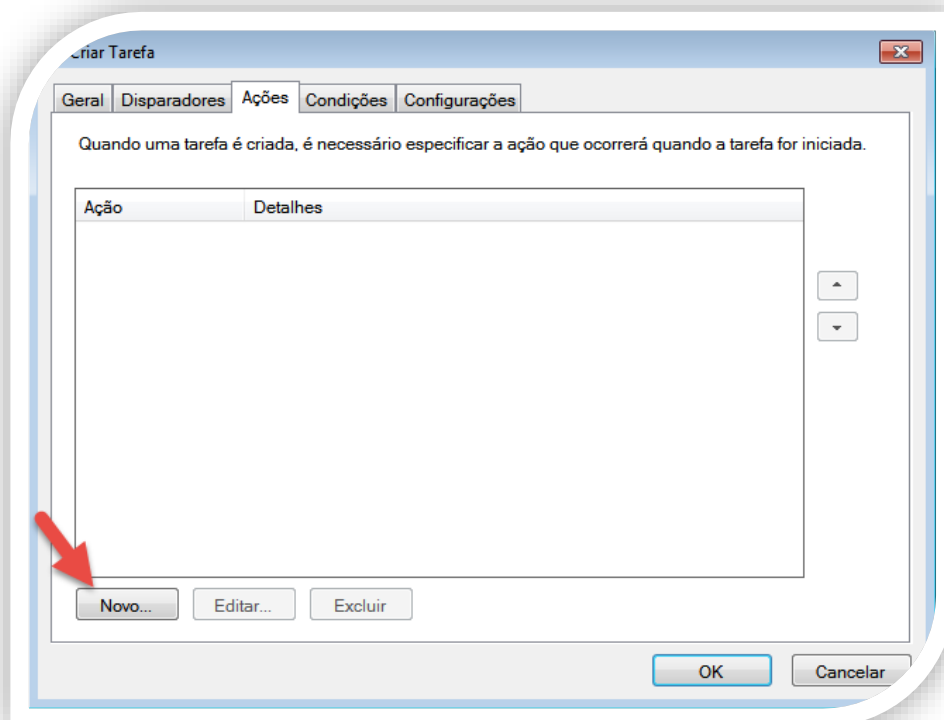

10. Nesta tela, defina no campo **Ação** “Iniciar um programa”.
11. Selecione o arquivo **fpw_adapter.exe** para ser executado.

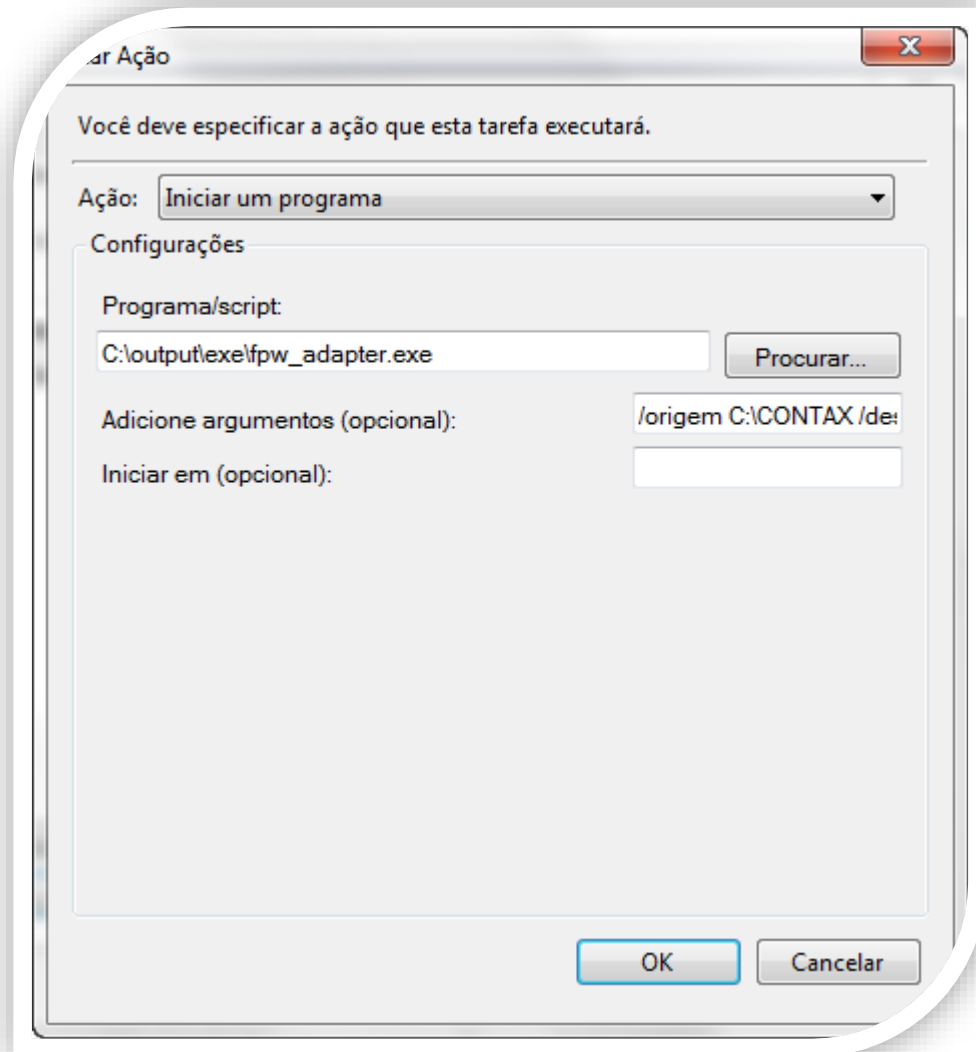

12. No campo **ADICIONE ARGUMENTOS**: digite **/origem C:\CONTAX /destino C:\CONTAX**. Onde **/origem** é a pasta de origem do arquivo FPW e **/destino**, é o destino onde o arquivo no formato Pmed Import será salvo.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Adaptador de layout
Sistemas Operacionais	Windows